

2018年5月吉日

お客様各位

日水製薬株式会社

## 新発売のご案内

腸内細菌確認用

# ニッスイチューブ TSI 寒天培地-N

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日ごろは弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。


さて、このたび弊社では腸内細菌確認用の試験管生培地ニッスイチューブ TSI 寒天培地-Nを新発売致しますので、ご愛用のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

【発売日】：2018年5月10日

品名	統一商品コード	日水製薬製品コード	包装	希望納入価格
ニッスイチューブ TSI 寒天培地-N	302057412	05741	20本	1,600円

(上記価格に消費税は含まれておりません)

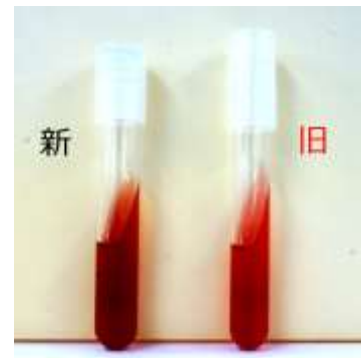

### 【貯蔵方法・使用期限】

- ・貯蔵方法 冷所（2～8℃）保存 禁凍結
- ・使用期限 4ヶ月間

### 【特徴】

- ・3種類の糖（ブドウ糖および乳糖、白糖）の分解、ガス産生、硫化水素産生能による腸内細菌の鑑別に用いられます。
- ・被検菌を高層部にせん刺後、斜面に塗抹接種し、キャップをゆるめて培養します。（通常 35～37℃、18～24時間培養）
- ・スクリュウキャップからワンタッチキャップに変更し、より使いやすくなりました。

発売元

 日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野三丁目24番6号  
カスタマーサポート TEL:03-5846-5707

2018年5月吉日

お客様各位

日水製薬株式会社

## 新発売のご案内

腸内細菌確認用

# ニッスイチューブ SIM 培地-N

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日ごろは弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。


さて、このたび弊社では腸内細菌確認用の試験管生培地ニッスイチューブ SIM 培地-N を新発売致しますので、ご愛用のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

【発売日】：2018年5月10日

品名	統一商品コード	日水製薬製品コード	包装	希望納入価格
ニッスイチューブ SIM 培地-N	302057429	05742	20本	1,600円

(上記価格に消費税は含まれておりません)

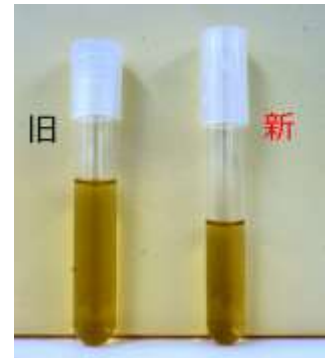

### 【貯蔵方法・使用期限】

- ・貯蔵方法 冷所（2～8℃）保存 禁凍結
- ・使用期限 4ヶ月間

### 【特徴】

- ・硫化水素産生能、インドール産生能、運動性により、腸内細菌の鑑別・確認に用います。
- ・被検菌を高層部中ほどまでせん刺し、キャップをゆるめて培養します。（通常 35～37℃、18～24 時間培養）
- ・スクリューキャップからワンタッチキャップに変更し、より使いやすくなりました。

発売元

 日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野三丁目24番6号  
カスタマーサポート TEL:03-5846-5707

2018年5月吉日

お客様各位

日水製薬株式会社

## 新発売のご案内

腸内細菌確認用

# ニッスイチューブ LIM 培地-N

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日ごろは弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。


さて、このたび弊社では腸内細菌確認用の試験管生培地ニッスイチューブ LIM 培地-Nを新発売致しますので、ご愛用のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

【発売日】：2018年5月10日

品名	統一商品コード	日水製薬製品コード	包装	希望納入価格
ニッスイチューブ LIM 培地-N	302057436	05743	20本	2,160円

(上記価格に消費税は含まれておりません)

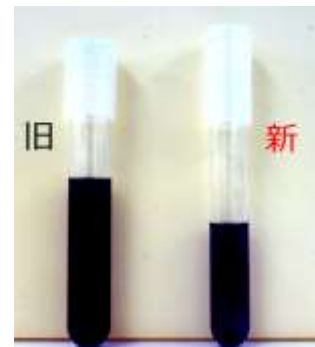

### 【貯蔵方法・使用期限】

- ・貯蔵方法 冷所（2～8℃）保存 禁凍結
- ・使用期限 4ヶ月間

### 【特徴】

- ・リジン脱炭酸能、インドール産生能、運動性により、腸内細菌の鑑別・確認に用います。
- ・被検菌を高層部中ほどまでせん刺し、キャップをゆるめて培養します。（通常 35～37℃、18～24 時間培養）
- ・スクリュウキャップからワンタッチキャップに変更し、より使いやすくなりました。

発売元

 日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野三丁目24番6号

カスタマーサポート TEL:03-5846-5707